


**Alecto<sup>®</sup>**

**BC-19**

**TERMÓMETRO**

**MANUAL DE USUARIO**



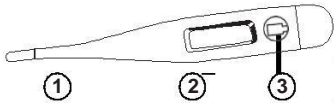

1: sensor de temperatura

2: Pantalla

3: botón de encendido/inicio/parada/memoria/apagado



Visualización de la temperatura



Memoria de visualización de temperatura



Batería vacía

## **INTRODUCCIÓN**

Este termómetro Alecto BC-19 es un termómetro digital desarrollado para tomar su temperatura de la manera más sencilla posible y con la mayor precisión posible. Para obtener los resultados más fiables, estas instrucciones deben seguirse con precisión. Para obtener la lectura más precisa de temperatura, recomendamos utilizar el termómetro por vía rectal.

Aunque la temperatura "normal" generalmente aceptada es de 37,0 °C, la temperatura corporal puede variar de 36,1 °C a 37,2 °C.

Las fluctuaciones de temperatura pueden deberse a actividades como el deporte, el tabaquismo, la alimentación y la bebida, y también dependen de la parte del cuerpo donde se toma la temperatura. Cuando se mide por vía oral, la temperatura corporal es generalmente 0,5 °C más baja que cuando se mide por vía rectal, mientras que la temperatura medida debajo de la axila es 1,0 °C más baja. Su temperatura es más baja por la mañana que por la noche.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Rango de temperatura: 32,0 °C - 42,9 °C

Pantalla de baja temperatura: temperatura  $\leq$  32 °C, pantalla: Lo°C

Pantalla de alta temperatura: temperatura  $\geq$  42,9 °C, pantalla: HI°C

Resolución de pantalla: 0,1 °C

Precisión: entre 35,5°C - 42,9°C:  $\pm$  0,1°C, entre  $\leq$  35,5°C  $\geq$  42°C:  $\pm$  0.2°C

Temperatura normal  $\leq$  37,8 °C: 10 pitidos

Alarma de fiebre  $\geq 37,8$  °C: 10x3 pitidos

Apagado automático: 10 minutos  $\pm$  2 minutos

Pila: LR41, 192 o SR41

Consumo de energía: 0,15 mW

Duración de la pila: 2 años

Dimensiones: 136 x 22 x 14,5mm Peso:  $\pm$ 14 gr (batea incl.) Condiciones de uso:

Temperatura: 10°C - 35°C

Humedad: 25% - 80% HR Condiciones de almacenamiento:

Temperatura: -25°C - 55°C Humedad: 25% -80% HR

### **MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA**

-Presione la tecla ON/OFF una vez para activar el termómetro. Escucharás un pitido.

-La pantalla muestra sucesivamente: '188.8°C', la última temperatura medida «37,0» (para la calibración interna), «LO» y el parpadeo «°C» (\*)

-Coloque el termómetro en la parte del cuerpo elegida para medir su temperatura.

Cuando escuche pitidos, su temperatura ha sido registrada.


- Si la temperatura de su cuerpo es normal, escuchará 10 pitidos
- si la temperatura de su cuerpo está por encima de lo normal ( $\geq 37,8$  °C), escuchará pitidos de 10x3.

Presione la tecla ON/OFF para apagar el termómetro. (El termómetro se apagará automáticamente después de aprox. 10 minutos).

*\*: Si la temperatura ambiente es superior a 32,0 °C, se mostrará la temperatura ambiente en lugar de 'Lo'.*

**-Medición debajo de la lengua:** Coloque el medidor debajo de la lengua, lo más atrás posible hacia la izquierda o hacia la derecha.

La temperatura que se toma debajo de la lengua es aproximadamente 0,5 °C más baja que cuando se toma por vía rectal.

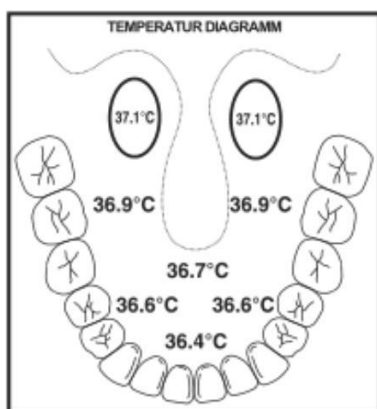

### **-Medición debajo del brazo**

Asegúrese de que la axila esté seca y coloque el termómetro debajo del brazo. El sensor debe tocar la piel. Mantenga el brazo cruzado frente al pecho.

La temperatura que se toma debajo de la axila es aproximadamente 1,0 °C más baja que cuando se toma por vía rectal.

### **-Medición rectal**

Inserte el sensor del termómetro con cuidado (máximo 1,25 cm).

### **BATERÍA BAJA**

La batería está baja cuando aparece el símbolo ■ en la pantalla.

**La pila no se puede reemplazar.** Reemplace el termómetro completo

### **ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO**

Al final del ciclo de vida del producto, no debe tirar este producto a la basura doméstica normal, sino llevar el producto a un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje.

### **CONSEJOS Y ADVERTENCIAS**

- Mantenga el termómetro y la pila fuera del alcance de los niños.
- No hable ni camine mientras se toma la temperatura.
- Guarde el termómetro en el estuche especial.
- No exponga el termómetro a la luz solar directa, al polvo o a la humedad.
- No desmonte el termómetro.

### **ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA**

Limpie el termómetro antes y después de usarlo, usando un paño suave y alcohol, o agua fría con jabón. El termómetro puede sumergirse brevemente en agua o alcohol (no remojar ni esterilizar). Guarde el termómetro en el estuche especial.

### **CE**

La declaración de conformidad puede obtenerse en:

<http://DOC.hesdo.com/BC-19-DOC.pdf>

## GARANTÍA

Para el termómetro Alecto BC-19 tienes una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Todo ello sometido a la valoración final del importador.

CÓMO USAR: Si nota algún defecto, consulte primero el manual del usuario. Póngase en contacto con el proveedor de este termómetro o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Alecto a través de Internet [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

LA GARANTÍA QUEDA ANULADA en caso de uso inadecuado, conexiones incorrectas, fugas y/o pilas instaladas incorrectamente, uso de piezas o accesorios no originales, negligencia y en caso de defectos causados por humedad, incendio, inundaciones, rayos y desastres naturales.

En caso de modificaciones y/o reparaciones no autorizadas realizadas por terceros. En caso de transporte incorrecto del dispositivo sin el embalaje adecuado y cuando el dispositivo no vaya acompañado de esta tarjeta de garantía y comprobante de compra. Queda excluida cualquier otra responsabilidad, especialmente en lo que respecta a los daños indirectos



 Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd,  
Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,  
Wuchang Town, Yuhang District ,  
Hangzhou, Zhejiang 310023  
Model: DT-K101A

 Shanghai International Holding Corp. GmbH,  
Eiffestrasse 80, 20537  
Hamburg Germany

Imported by: Commaxx B.V.  
Wiebachstraat 37, 6466 NG  
Kerkrade, The Netherlands



