


# JXB-178




## Termómetro médico digital sin contacto

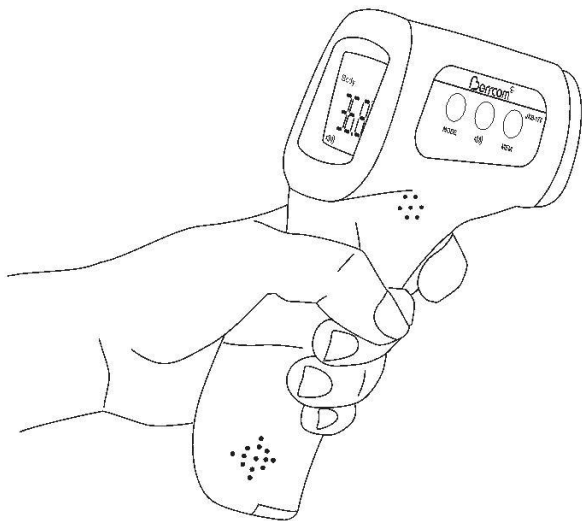

Manual de Usuario


# INSTRUCCIONES



1. Instale las baterías (2 x AA – NO INCLUIDAS)
2. Cuando se usa por primera vez o cada vez que se reemplazan las baterías, espere de 10 a 15 minutos antes de realizar una medición.
3. Presione el botón ON/SCAN colocando el sensor infrarrojo del termómetro a una distancia entre 3 y 5 cm de la frente. La medición se completa cuando el valor de temperatura aparece en la pantalla LCD, acompañado de una advertencia sonora que dura 1 segundo.

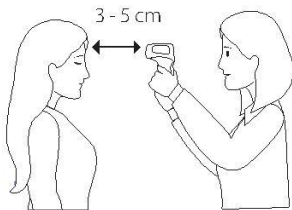

**ATENCIÓN:** no mueva el termómetro antes de completar la medición.

4. Antes de comenzar la medición en la frente, asegúrese de que no haya cabello en el área de detección.

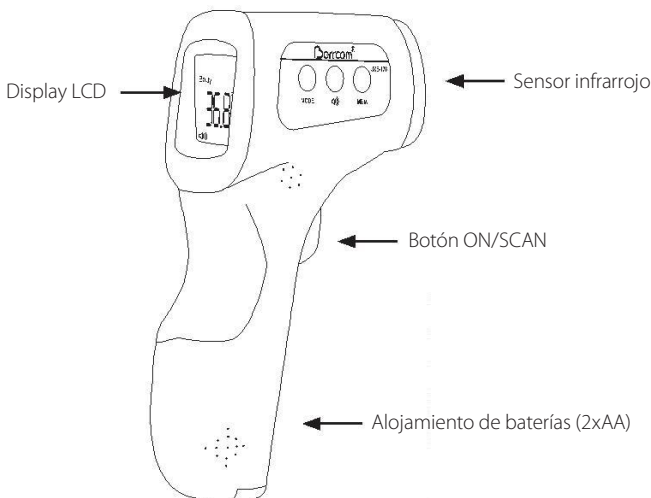

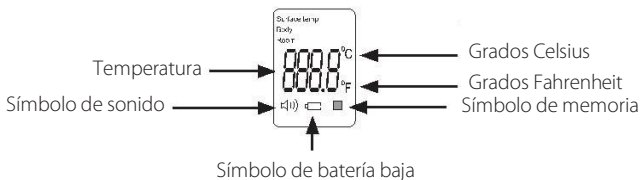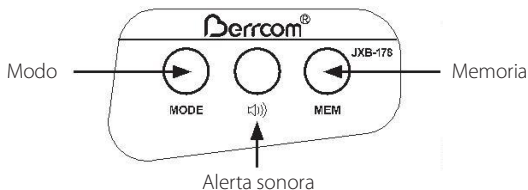

## MENÚ DE CONFIGURACIÓN Y FUNCIONES

1. Encendido del termómetro: Presione el botón ON/SCAN, un segundo después, la pantalla se ilumina indicando "---°C" o "---°F". Al presionar el botón nuevamente, obtendrá el resultado de la medición después de 1 segundo. Si no se deben realizar más mediciones, el termómetro se apagará automáticamente después de 30 segundos.
2. Con el termómetro en standby, presione el botón "mode" para acceder a los diferentes modos de funcionamiento.
  - a. Presione MODE y la pantalla mostrará Body ---°C (temperatura corporal)
  - b. Presione MODE nuevamente, la pantalla mostrará Room ---°C (temperatura ambiente)
  - c. Presione MODE nuevamente, la pantalla mostrará Surface ---°C (temperatura de la superficie)

**NOTA:** El termómetro está configurado de forma predeterminada para mediciones corporales (Body)

## SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA (°C/°F)

Con el termómetro en standby, presione el botón MODE durante 2 segundos. La pantalla mostrara F1, luego presione el botón MODE nuevamente para cambiar de la unidad de medida °C (Celsius) a °F (Fahrenheit).

## AJUSTE DE ALARMA

Con el termómetro en standby, presione el botón MODE durante 2 segundos, luego presione el botón MEM 1 vez. La Pantalla mostrara F2. Luego presione el botón MODE para seleccionar los limites de alarma de temperatura (entre 37.3 y 39.1). Confirme el valor presionando el botón MEM. El termómetro esta configurado con un valor predeterminado de 38°C. Con el termómetro en espera, presione el botón MEM durante 5 segundos para borrar todos los datos almacenados en la memoria. CL reaparecerá en la pantalla.

## DATOS ALMACENADOS

Con el termómetro en espera, presione el botón MEM (Memoria). La pantalla mostrara el valor de la ultima medición realizada presionándolo mas, se mostraran todas la mediciones anteriores (hasta 32).

## ADVERTENCIA ACÚSTICA

Con el termómetro en standby, presione el botón BUZZER para activar o desactivar la advertencia acústica. La escritura ON en la pantalla indica que el timbre esta activado, la escritura OFF indica que el timbre esta desactivado.

## REEMPLAZO DE LA BATERÍA

El símbolo de la batería aparece en la pantalla cuando las batería se están agotando. Por lo tanto, es necesario reemplazarlos. Preste atención al insertar las baterías para un correcto posicionamiento. Una inversión de polaridad podría dañar el instrumento.

Nunca use pilas recargables. Use sólo pilas alcalinas.

